




Användarmanual

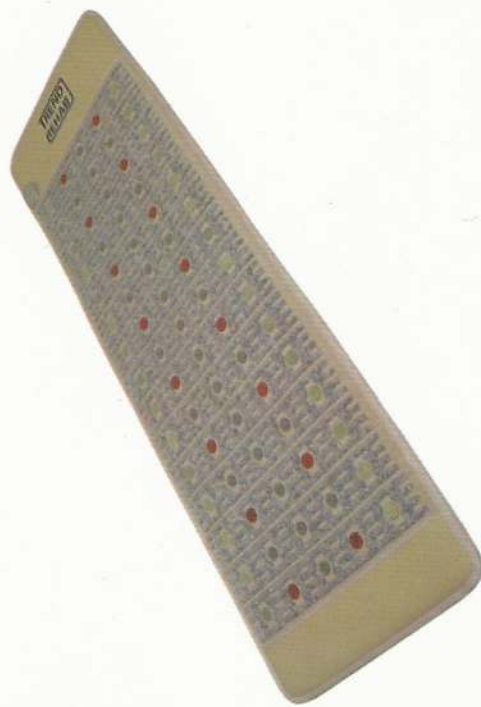

**PEMF Inframadrass med ametist, jade &
turmalinstenar samt fotoner**

TrendRehab photon PEMF ametistmatta är byggd med tusentals krossade och polerade naturliga ametistkristaller och 16 st fotoner, jadet och urmalinstenar, fixerade med hantverkssömnad och speciellt värmebeständigt tyg. Mattan är dessutom utrustad med PEMF och 660 nm foton i en kraftfull applikation. Digitala kontroller gör att man kan använda alla funktioner tillsammans eller att styra var och en separat. Så du kan använda värme-, foton- och PEMF-funktion individuellt.

Specifikation och produktmodell

Produktnamn: PEMF Inframadrass med ametist, jade & turmalinstenar samt fotoner

Produktmaterial: Ametist, 16 st Foton, PEMF, och turmalin

Jadestenar

Stenstorlek: 30 mm jade och 28 mm turmalin i diameter

Total mått och Vikt: 60x180 cm(10.4 kg)

Värme ytans mått: 55x140 cm

Specifikationer: Ström - 240v 50 Hz

Effekt: 200-240V ,50Hz 220W

Inställningstid: 1-12 timmar


Ansluts till vanligt vägguttag.

Kabellängd: 180 cm.

Det är FDA, ISO-godkänd enhet.

Användningsinstruktioner

1. Sätt i styrenhetens kontakt i mattan.
2. Anslut kontakten till ett eluttag. Tryck på strömknappen.
3. Tryck på "Öka timer / +" eller "Minska timer / -" för att justera timern. Tiden regleras till 1-12 timmar efter önskemål. Fönstret kommer att visa den tid du ställer in.
4. Tryck på "Öka temperatur / +" eller "Minska temperatur / -" för att justera temperaturen. Fönstret visar mattans temperatur.
5. Tryck på PEMF-knappen. PEMF fungerar i 20 minuter och stannar.
6. Tryck på Foton-knappen. Fotonen fungerar i 1 timme och stannar.
7. När mattan är tillräckligt varm kan du justera värmen så att den känns behaglig. Sänk temperaturinställningen vid behov värme.
8. Stäng av strömbrytaren efter användning och koppla bort den från nätsladden.

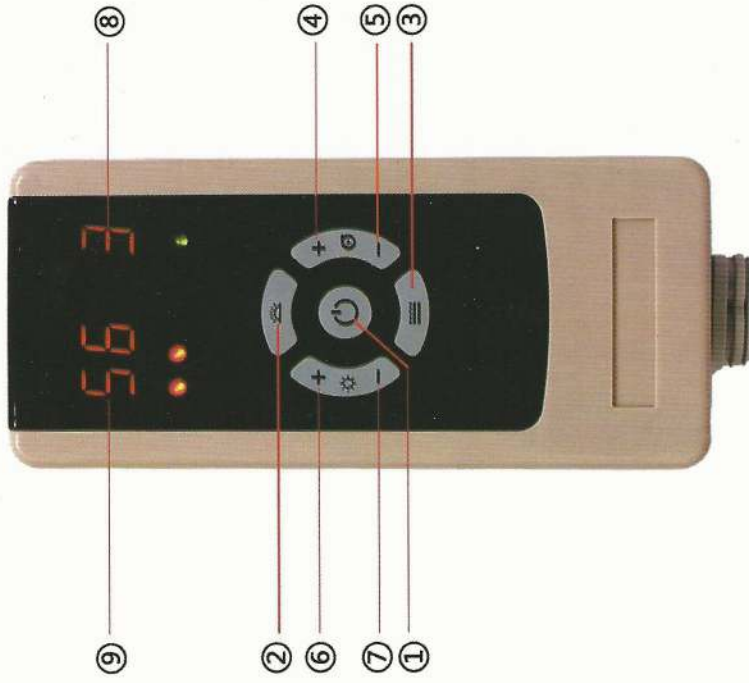

1. PÅ / AV REGLAGE

2. FOTON

3. PEMF

4. KNAPP FÖR ÖKNING AV UPPVÄRMNINGSTIDEN

5. KNAPP FÖR ATT MINSKA
UPPVÄRMNINGSTIDEN

6. KNAPP FÖR ÖKNING AV TEMPERATUR

7. KNAPP FÖR MINSKNING AV TEMPERATUR

8. UPPVÄRMNINGSTID FÖNSTER

9. TEMPERATUR DIGITAL DISPLAY

Bruksanvisning

ANVÄND INTE om du är gravid, bärare av pacemaker eller andra implanterade batteridrivna enheter, såsom defibrillator och infusionspump.

Fråga din läkare innan du använder denna produkt om du har några redan existerande tillstånd som kan orsaka oro.

Ta inte isär eller modifiera mattan eller styrenheten.

Använd inte skadad styrenhet, nätsladdar, uttag eller kontakter.

Koppla ur strömmen när den inte används.

Placera inte tunga föremål eller lättantändliga material på mattan.

Vik inte mattan när du använder den.

Håll vatten borta från mattor och kontroller.

Använd torr trasa och dammsugare för rengöring.

Koppla alltid ur strömmen innan du rengör och viker mattan.

Använd den medföljande påsen för att förvara mattan.

Om du behöver lägga en filt över mattan, sprid den alltid jämnt för att upprätthålla enhetlig värmeavledning.

Rengöring

1. Stäng av strömmen när madrassen behöver rengöras och underhållas.
 2. Produktens yta ska rengöras med torr trasa.
 3. Dammet mellan ametisten bör rengöras med rengöringsmedel
 4. Förbjud att använda flytligt lösningsmedel för att rengöra madrassen.
 5. Håll produkten torr, undvik kontakt med vatten eller diversifierad vätska.
 6. När du är klar med rengöringen, torka i luften.
 7. Använd torr tvättilapp för att rengöra ytan på styrenheten.
(Styrenhetens kraft bör avbrytas)
- * För att garantera produktens livslängd bör du vara uppmärksam på att hålla den ren.

Kan ge bättre sömn och bättre immunförsvar.

En effektiv terapi som är enkel och riskfri att använda helt utan biverkningar. Används tex för att förbättra lymfsystemet, minska smärta vid fibromyalgi eller motverka sömnbesvär

DJUP INFRARÖDVÄRME Förbättrar blodcirkulationen och cellförmøyelsen. Hjälper till att modulera sömn. Hjälper till att lindra smärta och inflammation samt förbättrar immunförsvaret.

Produktfunktion

1. Ametistkristallfunktion

1) Förbättrad immunförsvarsfunktion

2) Förbättrad cirkulation och kardiovaskulär funktion

3) Smärtlindring

4) Ökad ärnnesomsättning och viktkontroll

5) Lindring av ledvärk och stelhet

6) Minskad stress och trötthet

7) Förbättrad hudhälsa

8) Övergripande känsla av balans

Som en superenergiledare erbjuder ametist ett stadigt och kraftfullt leveranssystem för ett fördelaktigt långt infrarött ljus och vibrationsfrekvenser in i människokroppen.

2.JADE funktion

JADE Hjälper kroppens reningssystem och frigör slaggprodukter.

Stabiliserar psyket och motverkar deppighet. Ger en djup avslappning, minskar stress och spänningar

3.TURMALIN funktion

TURMALIN Hjälper lymfsystemet och minskar svullnad. Ökar blodcirkulationen. Hjälper till att eliminera giftiga metaller och få ut slaggprodukter. Minskar mjölksyra och fria fettsyror. Hjälper avgiftning.Ökar fettförbränningen. Stödjer

lever och njurar. Hjälper till att frigöra emotionell stress samt lindra migrän och huvudvärk. Kan motverka deppighet.

4. Foton funktion

Fotonterapi har visat sig i över 40 år av oberoende forskning över hela världen för att ge kraftfulla terapeutiska fördelar för levande vävnader och organismer. Och det har visat sig åstadkomma minst 24 olika positiva förändringar i en cellulär spak. Synligt rött ljus, med en våglängd på 660 nanometer tränger igenom vävnaden till ett djup av ca 8-10 mm. Det är mycket välgörande för att behandla problem nära ytan som sår, skärsår, skrämmor, utfösare och akupunkturpunkter och är särskilt effektivt vid behandling av infektioner.

Använd 660 nm foton kan hjälpa till att läka för följande:

Artrit, ryggsmärtor, celluliter, kronisk smärta, ödem, smärta i fot och fotled, huvudvärk, inflammatoriska tillstånd, ledvärk, osteoartrit, postoperativa ärr, postkirurgiska smärtor, reumatoid artrit, mjuk vävnadsskada, idrottsskador, tendonit, ryknor

5. PEMF funktion

PEMF (magnetisk terapi eller pulserad elektromagnetisk terapi)

är användningen av ett pulserande elektromagnetiskt fält för att stimulera celler och kroppskemi för att underlätta läkningsprocessen för många olika medicinska och fysiska tillstånd.

Arcadia Clinic i Kassel Tyskland har observerat massiva förändringar i energinivåer hos patienter som behandlats med PEMF inklusive ökning av näringsabsorptionen, förbättringar av emotionell hälsa och avgiftning. FDA godkände / godkände 1982 PEMF-behandlingar som används för att främja läkning av benfrakturer. Den har nyligen släppts för användning vid trans-kraniell magnetisk stimulering för depression och till och med bipolär sjukdom.